




- Faire porter un masque chirurgical au patient à prélever
- Le préleveur s'équipe d'une surblouse, d'une charlotte, d'un masque FP2, de lunettes de protection et d'une paire de gants
- Faire asseoir le patient
- Lui faire enlever le masque chirurgical
- Faire moucher le patient pour enlever les sécrétions.
- Maintenir la tête du patient inclinée en arrière



- Introduire l'écouvillon jusqu'au carrefour nasopharyngé **1**
- Réaliser plusieurs rotations de l'écouvillon (10 secondes) puis le retirer
- **Faire de même pour la deuxième narine avec le même écouvillon**



- L'écouvillon est ensuite plongé dans le milieu de transport **2** (Casser la tige manuellement pour permettre la fermeture étanche du bouchon)

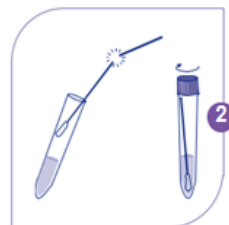

- Désinfecter l'extérieur du tube
- Etiqueter le tube avec l'étiquette du patient.
- Mettre le tube dans le second emballage, le désinfecter
- Placer le second emballage dans la pochette plastique désinfectée
- Joindre au prélèvement (pochette externe) :
 - La prescription médicale
 - La fiche de renseignement disponible sur CROSSWAY **obligatoirement remplie** (imprimer la fiche directement, ne pas faire de photocopie)
- Coller une étiquette patient sur la pochette
- Faire remettre le masque chirurgical au patient
- Eliminer les EPI
- Finir par une friction des mains au gel/solution hydroalcoolique.



- Faire acheminer le prélèvement au laboratoire le plus rapidement possible à température ambiante.